

SKJYLEAN PRODUCT MANUAL

苏科产品手册

► Make every experiment easier







Make every experiment easier

WELCOME

更便捷的实验

Easier

experimentation

更好的实验室耗材

Better

lab consumables

CONTENT

目录

其他系列产品目录

Other series of product catalogs

07



- 07 热熔胶枪
- 08 超声波耦合剂
- 09 螺旋测微器
- 10 游标卡尺
- 11 测厚仪
- 12 计时器
- 13 老鼠脱毛膏
- 14 免疫组化笔
- 15 记号笔
- 16 油漆笔
- 17 防爆柜隔板
- 18 铝盒
- 19 2道电子秒表
- 20 数显食品温度计
- 21 温湿度计

25



- 25 万用表
- 26 三相调压器
- 27 真空硅脂
- 28 道康宁PDMS184 胶
- 29 真空泵油
- 31 95%氧化锆珠
- 32 干冰
- 33 老鼠解剖加热垫
- 34 老鼠手术台LED灯
- 35 紫外消毒灯
- 36 手提式紫外灯
- 37 紫外分析仪灯管
- 38 紫外灯管架
- 39 防爆红外线灯泡
- 40 实验室红外线灯

41



- 41 红外烘烤灯
- 42 汞灯泡
- 43 酒精灯芯
- 44 气相色谱柱
- 45 填充墨盒
- 46 吸收瓶采样箱
- 47 实验记录本
- 48 光照度计
- 49 184稀释剂
- 50 PH标准缓冲液
- 51 PTFE乳液/粉末
- 52 实验动物电动剃毛器
- 53 实验室器皿清洗剂
- 54 钢制裁纸刀
- 55 木制裁纸刀

56



- 56 数显万用表
- 57 高效切片石蜡
- 58 热熔器胶棒
- 59 动物标记笔
- 60 进口动物标记笔
- 61 封闭电炉
- 62 达因笔
- 63 铝制迷你酒精灯
- 64 蒸馏水

OTHER SERIES

—
其它系列

苏科精益仪器

更好的耗材,更便捷的实验



实验室红外线灯

HOT MELT GUNS

热熔胶枪

热熔胶枪是一种装修工具,广泛用于电子厂、食品厂、包装厂、等热熔胶条黏结产品。



产品特性

Product Features

- 防倒胶设计,内置止滑圈,可以防止胶棒后退,如果发生倾倒,也不会流出;
- 操作简单,枪身及结构特别轻巧,铝塑分体式枪膛隔热装置,不渗胶、不倒胶,操作舒适。



货 号	规 格	单 位
SK-3672	100W+10根胶棒	个

ULTRASONIC COUPLANT

超声波耦合剂



超声耦合剂介绍 超声耦合剂是指在超声检查或治疗过程中,用于在超声探头和人体皮肤之间增加声学耦合效果的物质。超声耦合剂的作用是优化声波传输,提高超声信号的清晰度和强度,从而提高超声检查或治疗的效果。

- 水溶性分子材料,保湿因子,导声降噪,导声降噪,温和不刺激,透明无异味,无损伤或腐蚀;
- 医用超声耦合剂,大容量,本产品味环保、亲肤、水溶性的高分子凝胶,专为超声多普勒胎心仪开发的耦合剂;
- 透明度高,晶莹剔透,采用水溶性分子材料,富含保湿因子,操作方便;



货 号	规 格	单 位
SK-3675	TM-100	瓶
SK-3676	TM-100	5瓶/箱

MICROMETER

螺旋测微器



螺旋测微器 是一种用于精密测量线性尺寸的机械仪器,也叫做卡尺式深度计。它利用了螺旋的原理来实现高精度测量,广泛应用于机械加工、精密制造和科学研究等领域。螺旋测微器的测量原理基于螺旋的运动规律。螺旋测微器由两个主要部件组成:一对卡尺和一个可旋转的螺旋测头。当螺旋测头转动时,由于螺旋测头和卡尺之间的切向接触力,卡尺会沿着螺旋线的轴向移动,从而改变卡尺的有效长度。

产品特性

Product Features

- 滚轮印花微调旋钮,转动顺畅内置棘轮阻力装置,测力均匀;
- 本产品采用粉末冶金尺身表面镀铬,工艺精美,耐用;
- 机械读数适用于大批量单一尺寸测量数据测量稳定高效。清晰刻度,满足您的工作需求。

高精度数显千分尺/测厚仪

货 号	规 格	单 位
SK-4715	机械款0-25mm	个
SK-4716	机械款25-50mm	个
SK-4717	标准机械款50-75mm	个
SK-4718	标准机械款75-100mm	个
SK-4719	标准机械款0-25mm	个
SK-4720	标准机械款25-50mm	个
SK-4721	数显款0-25mm	个
SK-4722	数显款25-50mm	个
SK-4723	数显机械两用款0-25mm	个
SK-4724	数显机械两用款25-50mm	个

高精度数显千分尺/测厚仪

货 号	规 格	单 位
sk-2179	25-50mm	个
sk-2180	50-75mm	个
sk-2178	0-25mm	个
sk-2181	75-100mm	个

VERNIER CALIPERS

游标卡尺

数显游标卡尺, 是以数字显示测量示值的长度测量工具, 是一种测量长度、内外径的仪器。数显游标卡尺采用光栅、容栅等测量系统。

主要用于测量、皮革、橡胶、纸张织物及各种纸张金属板材、塑料板等的厚度。



- 原点技术,任意位置归零,测量过程中任意清零,便于绝对值与相对值的测量;
- 紧固螺母,锁定测量数据,螺母可拧紧锁定测量数据,便捷实用;
- 微调辅轮,测量更精准耐用,闭式微调设计测量顺畅,提升测量准确度。



货 号	规 格	单 位
sk-2176	200mm (绿膜)	把
sk-2177	300mm (绿膜)	把
sk-2175	150mm (绿膜)	把
sk-2174	300mm (白膜)	把
sk-2172	150mm (白膜)	把
sk-2173	200mm (白膜)	把

THICKNESS GAUGE

测厚仪



测厚仪 (thickness gauge) 是用来测量材料及物体厚度的仪表。在工业生产中常用来连续或抽样测量产品的厚度 (如钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等材料)。



- 合金测头, 合金测量面冥缝级测量, 两个测量面经精细研磨确保闭合时达到冥缝级;
- 按压测里, 按压测量顺畅舒适, 1.6MM厚优质不锈钢手柄快速测量;
- 大屏数显, 快速读数, 清晰大数字, 一目了然。

货 号	规 格	单 位
SK-3594	0-12.7/百分	个
SK-3595	0-12.7/千分	个
SK-3596	0-25.4/百分	个
SK-3597	0-25.4/千分	个

TIMER

计时器

计时器, 是利用特定的原理来测量时间的装置。计时器可以用来帮你解决这些问题。操作界面简便易用, 提供了基本的计时控制功能, 包括: 开始计时、停止计时、继续计时、操作界面简便易用复零、调整计时。

- 清脆响铃, 适合商用, 蜂鸣器响声声音大轻松掌握时间;
- 低功耗, 待机时间长, 采用低功耗屏幕, 给你更长久的舒适生活;
- LCD大屏, 识读无障碍, 呵护双眼不伤眼LCD液晶大屏幕显示清晰;
- 应用范围, 烘焙使用, 学习使用, 图书馆使用, 工作使用等。




货 号	容 量	单 位
sk-f0474	蓝色	个

MOUSE DEPILATORY CREAM

老鼠脱毛膏



- 安全放心,上市前通过专业皮肤测试,舒缓呵护,珍爱每一个实验动物,确保实验数据准确;
- 深层脱毛,直抵毛根,不留黑点;
- 植物菁粹,无刺痛,泛红,灼热等不良反应;
- 不刺激皮肤,不影响动物毛发二次生长。

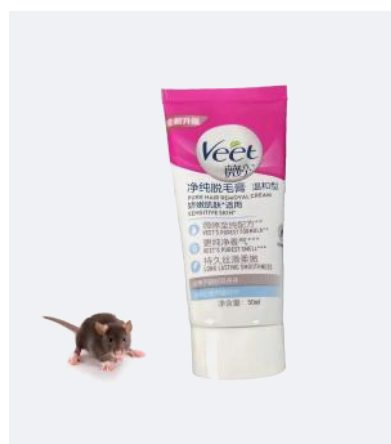

货号	规格	单位
sk-f0515	200g	盒
sk-1717	100g	支

IMMUNOHISTOCHEMISTRY PEN

免疫组化笔

免疫组化笔又叫Pap Pen, PAP PEN-笔、DAKO PEN-笔、免疫组织化学PAP笔、超级免疫组化笔、PAP笔、Super Pap Pen。适用于玻璃切片的各种免疫组织化学染色实验,如PAP 法, ABC法, 免疫荧光法, 冰冻切片及原位杂交技术, 可减少抗体和试剂用量, 避免染色时液体流淌和扩散, 提高操作速度。



- 耐热性能: 试验过程中的耐热性为120摄氏度以下;
- 防水性能: 优秀;
- 画圈次数: 一般正确用法下, 小号500次以上;
- 画圈快捷、笔液输出均衡、玻片不易污染、标本制作简单。抗体、试剂等在被画圈内不易流失;
- 笔液内物质不溶解在酒精和丙酮里, 但可被二甲苯去除。

货 号	规 格	单 位
sk-1896	4ml	支
sk-1895	3ml	支

MARKER

记号笔



记号笔是一种可在纸张、木材、金属、塑料、搪陶瓷等一种或多种材料上书写作记号或标志的笔。

记号笔分为油性记号笔和水性记号笔。水性记号笔可以在光滑的物体表面或白板上写字，用抹布就能擦掉（白板笔），油性记号笔写的就不易擦除。

记号笔黑色马克笔勾线笔大头笔

货 号	规 格	单 位
SK-R091	蓝色10支	盒
SK-R090	红色10支	盒
SK-R092	5支黑色5支红色	盒
SK-R094	5支黑色3支红色2支蓝色	盒
SK-R089	黑色10支	盒
SK-R093	5支黑色5支蓝色	盒
SK-R095	6支黑色2支红色2支蓝色	盒

记号笔/小双头油性记号笔

货 号	规 格	单 位
sk-1653	黑色	12支/盒
sk-1654	蓝色	12支/盒
sk-1655	红色	12支/盒

PAINT PENS

油漆笔



edding 750 油漆笔可书写在任何表面上,无论表面平滑、粗糙还是闪闪发光。这种笔特别适合在玻璃、塑料、木材和金属上做标记,是 DIY 热表者的专用多功能标记笔。edding 750 油漆笔的墨水防水、耐热,这意味着它特别适合在您家庭车间中的锯和打磨机上做标记。

产品特性 Product Features

- 书写流畅、顺滑的书写体验、源于耐磨纤维笔头和快干油性墨水、享受书写乐趣;
- 速干防水,笔芯出墨均匀、顺畅防水,且不易退色易于文字标注;
- 多颜色可选,粗头设计可用来标记,耐磨纤维笔头不易变形、书写流畅顺滑;
- 永久性标记油性油墨,在微油、多尘和深色表面上进行高度持久的标记,在阳光照射和高温环境下也不易褪色。

货 号	规 格	单 位
sk-1854	蓝色	5支/盒
sk-1853	黄色	5支/盒
SK-1552	绿色	5支/盒
SK-1851	白色	5支/盒
SK-1850	红色	5支/盒
sk-1849	黑色	5支/盒

EXPLOSION-PROOF CABINET PARTITIONS

防爆柜隔板



产品特性

Product Features

- 镀锌层板特性, 锌可在钢铁表面形成保护层, 还因为锌具有阴极保护效果, 当镀下锌层破损, 它仍能通过阴极保护作用来形成保护层, 防止钢板被腐蚀;
- 操作方便, 镀锌层板用于防爆柜加层使用, 多少加仑防爆柜直接选用多少加仑层板, 可直接使用, 操作简便, 运用多余空间, 可以储存更多化学品。

货 号	规 格	单 位
SK-3718	4加仑	个
SK-3719	12/15/22加仑	个
SK-3720	30/45加仑	个
SK-3721	60加仑	个
SK-3722	90加仑	个
SK-3723	110加仑	个

ALUMINUM BOX

铝盒



灭菌铝盒适用于学校、实验室、工矿企业、食品行业等高温高压灭菌。

产品特性

Product Features

- 加厚铝质制作, 质地坚韧, 经久耐用, 不易生锈;
- 分体设计, 盒盖可掀, 清洗消毒方便;
- 表面光滑, 边缘圆滑设计, 不伤手, 方便操作;
- 实验室消毒盒, 可承受121°C 30min高温蒸汽灭菌, 使用方便。



货 号	规 格	单 位
SK-3939	1.4L(213*120*60MM)	个
SK-3940	0.85L(195*110*45mm)	个

2-CHANNEL ELECTRONIC STOPWATCH

2道电子秒表



电子秒表 (Cronometro) 是电子计时器的一种, 具有三个功能按钮。



产品特性

Product Features

- 按钮采用轻触微动开关, 手感舒适灵敏;
- 防磁、防震和防水结构;
- 选材考究, 外观精美, 品质过硬;
- 防滑设计, 唯美线条。

货号	规格	单位
sk-f0741	PS60	个

DIGITAL DISPLAY FOOD THERMOMETER


数显食品温度计



产品特性

Product Features


- 大屏幕数值,LED大屏显示,老人和孩子均可轻松读数,避免误读;
- 防水设计,生活防水,不发霉不藏污垢可湿手使用,省掉来回擦手的时间,使用非常方便;
- 准确快速测温,304不锈钢探头,导热性强,即使轻微的温度变化也能测出来;
- ABS树脂材质,稳定性和耐热性强,使用过程不会产生有害物质,使用更放心;

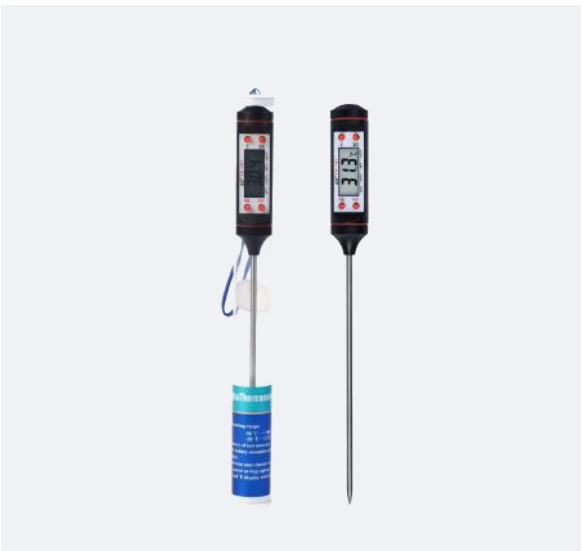

货 号	规 格	包 装
SK-R226	-50°C-300°C	个

THERMOHYGROMETER

温湿度计

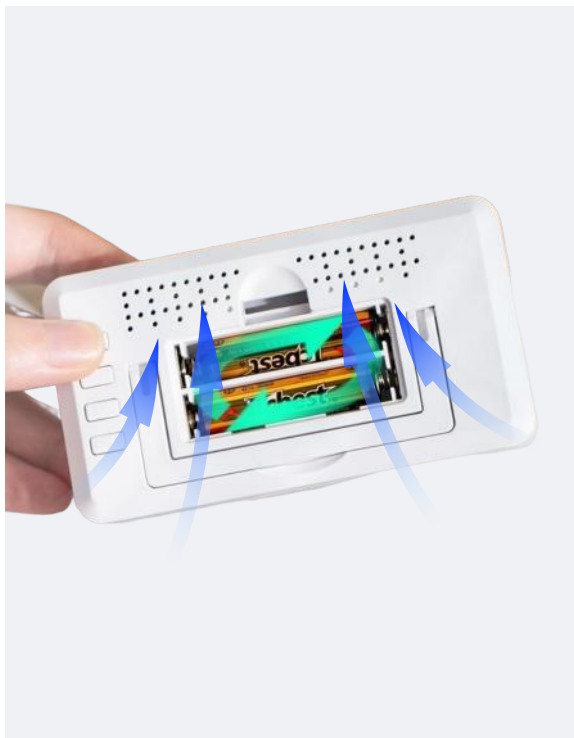

温湿度计是一种用于测量环境温度和湿度的设备，广泛应用于生产、仓储、日常生活等场景。

- 选材考究，外壳采用ABS材质，稳定性好，外观漂亮，色泽长久，有良好的手感；
- 清脆响声，不仅仅是个温湿度计，还是个闹钟帮助上班族、学生养成良好的作息时间把握时间进程，有效管控时间；
- LCD大屏，采用4.0英寸的LCD显示屏，高清数字显示，简洁易懂多视角观察，仍然清晰可见；
- 感应速度快，背面两侧设有进气孔，使空气能广泛的接触内部感应片加快感应速度，反应灵敏，数值准确。



温湿度计

货号	规格	单位
sk-f0739	数显	个



- 超限值报警,随时可打开/关闭报警功能,当实测温度超出限值就会报警提示;
- 通风快测得准,空气对流通风设计,加大机内空气流通速度提高准确性;
- 感知周围空气,冷暖干湿一目了然,室内或室外温湿度同时测量的仪器,家居或办公场所之台座或挂壁装饰。



eth529电子温湿度计/温湿度计

货 号	规 格	单 位
sk-f0739	数显	个




- 高清大屏显示,清晰明确一目了然;
- 边角设计,圆弧边角设计,手感舒适;
- 通风设计,双侧通风,测量更精准;



温湿度计表

货号	规格	单位
SK-087	HTC-8	个
SK-3185	HTC-1	个
SK-3186	HTC-8A	个

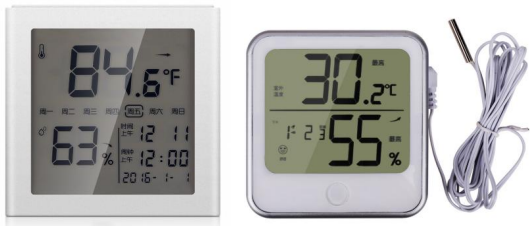

温湿度计表

货 号	规 格	单 位
SK-3187	8958	个
SK-3188	8959	个



温湿度计表

货 号	规 格	单 位
SK-3189	9015	个
SK-3190	9016	个
SK-3191	9017	个

MULTIMETER

万用表



万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如 β)等。

产品特性

Product Features

- 一掌可握,比手机更小,产品尺寸:134*77*47mm;
- 机身坚固,耐磨耐用,有效缓冲掉落在地上的冲击力;
- 自动关机,15分钟无操作自动关机,节能省电延长电池使用寿命;
- 通断蜂鸣,快速警报,电磁式蜂鸣器(声音更响亮)。



货号	规格	单位
sk-f6017	UT61E	个
sk-f6017-1	UT33A+	个
sk-f6017-2	UT33B+	个
sk-f6017-3	UT33C+	个
sk-f6017-4	UT33D+	个
sk-f6017-5	UT890D+	个
sk-f6017-6	UT890C	个
sk-f6017-7	UT89X	个
sk-f6017-8	UT89XD	个
sk-f6017-9	UT39A+	个
sk-f6017-10	UT39C+	个
sk-f6017-11	UT61E+	个
sk-f6017-12	UT204+	个

THREE-PHASE VOLTAGE REGULATOR

三相调压器

三相调压器(又称晶闸管电力调整器、可控硅电力调整器或简称电力调整器)是一种可调的自耦变压器,可作为带动三相负载的无级平滑调节电压设备。



- 三相接触调压器,0-430V随心所欲想调就调;
- 足匝纯铜线圈,用料充足,高质量纯铜线圈且散热,效果佳,制造做工扎实;
- 精准刻度,采用金属仪表盘,读字清晰不褪色,不易掉字;
- 防护外壳, 高效散热,条形通风网罩,散热性能更好,更安全。

货号	规格	单位
SK-F7010-1	1500W/0-430V可调	台
SK-F7010-2	3000W/0-430V可调	台
SK-F7010-3	6000W/0-430V可调	台
SK-F7010-4	9000W/0-430V可调	台
SK-F7011-1	1500W/0-500V可调	台
SK-F7011-2	3000W/0-500V可调	台
SK-F7011-3	6000W/0-500V可调	台
SK-F7011-4	9000W/0-500V可调	台

VACUUM SILICONE GREASE

真空硅脂



真空硅脂 (lotime) 是一种不会固化变硬的硅酮类润滑产品, 适用于电子、电气元件及连接器、接头等部件, 产品具有密封、保护、维护保养元件或部件的作用。

7501以无机稠化剂稠化合成油, 并加有多种高效添加剂精制而成。属于一种 应用于真空系统和其它部位的密封脂。



摩可7501高真空硅脂

货号	规格	单位
sk-f0775	7501/50g	盒



道康宁HVG 高真空硅脂 是应用于真空或压力系统中的密封润滑脂, 特性: 良好的润滑性和密封性; 低挥发性; 优良的耐水性; 耐化学腐蚀; 耐高低温。

道康宁 高真空硅脂

货号	规格	单位
sk-1265	道康宁HVG150g	盒



184 PDMS ADHESIVE

道康宁184 PDMS胶

PDMS(聚二甲基硅氧烷) (道康宁DC184) (BIOFOUNT公司 微流控芯片国产替代PDMS), 是由液体组分A+B组成的双组分套件产品,包括PDMS组分与固化剂。PDMS基本组分与固化剂按10:1重量比完全混合,中等粘度混合液的稠度与SAE40硅油相似。混合加热后 (建议80°C-120°C之间) 无论厚薄,混合液互混加热后将固化成为具有韧性的透明弹性体, 该产品被大量应用于微流控芯片的制作, 以及在电子、电气方面的封装与灌封大量应用。



货 号	规 格	单 位
sk-775	道康宁DC184 1.1kg	套

VACUUM PUMP OIL

真空泵油



爱德华真空泵油是一种专为爱德华真空泵设计的润滑油,它的性能参数对于保证真空泵的正常工作和延长使用寿命至关重要。爱德华真空泵油中含有抗氧化剂,能使泵经受高的工作温度而不会使油降解,因此延长换油间隔。此外,爱德华真空泵油还具有很好的抗磨性、热稳定性、氧化稳定性和抗锈性,有效保护真空泵内部零件免受损害。

爱德华真空泵油/泵油

货 号	规 格	单 位
sk-1733	UL19号/1L	瓶
sk-1732	UL70号/4L	桶
sk-1731	UL20号/4L	桶
sk-1730	UL15号/4L	桶
sk-1729	UL19号/4L	桶



普发真空泵油

特点:低蒸发压力无添加剂

主要用途:常用真空泵油,可用于旋片式真空泵及罗茨真空泵,用于泵空气,惰性气体,氨气,氦气,氢气及氧气等。有密封,润滑,冷却等功能。

普发P3真空泵油

货 号	规 格	单 位
sk-1219	5L	桶
sk-1218	1L	瓶

莱宝提供的润滑油为满足真空工艺应用的高要求而特殊配制, 具有高温时饱和蒸汽压低、水含量和吸水率极低。其粘度特性平稳; 润滑性能卓越; 具有耐热解以及抗机械压力的特点。根据不同应用要求 (耐水解或氧化, 不燃, DOT 兼容, 食品级认证等), 可选择使用不同类型的润滑油、润滑脂和润滑剂。

莱宝真空泵油/泵油

货 号	规 格	单 位
sk-1217	LV0210/5L	桶
sk-1216	LV0130/5L	桶
sk-1215	LVO120/5L	桶
sk-1214	LVO108/5L	桶
sk-1213	LVO100/5L	桶



惠丰润滑油生产的高 真空油 采用优质的基础油和进口添加剂调配而成, 是一种理想的润滑材料。产品抗磨性能明显提高, 能降低泵浦压缩时的界面磨损; 优良的氧化安定性, 有效的减少了换油次数; 良好的泡沫特性, 减少由于溢流、断流引起的真空泵磨损。

真空泵油/高真空油

货 号	规 格	单 位
SK-161	HFV-A200S-4L	桶
SK-160	HFV-A200-4L	桶
SK-156	HFV-100a-4L	桶
SK-159	HFV-A100-4L	桶
SK-158	HFV-46号-4L	桶
SK-157	HFV-68号-4L	桶




95% ZIRCONIA BEADS

95%氧化锆珠

氧化锆珠, 多为四方相氧化锆 (Tetragonal Zirconium Polycrystal) 组成, 所以也称“TZP” 锆珠, 是以微米级及亚纳米级氧化锆与氧化钇为原料制成的, 是用来对要求“零污染”及高粘度、高硬度物料的超细研磨及分散的一种研磨珠。

氧化锆珠 (简称“TZP” 锆珠) 以微米级及亚纳米级原料, 用先进的工艺制成。主要应用于要求“零污染”及高粘度、高硬度物料的超细研磨及分散, 如: 电子陶瓷、磁性材料、氧化锆、氧化硅、硅酸锆、钛白粉、医药食品、颜料、染料、油墨、特种化工行业。

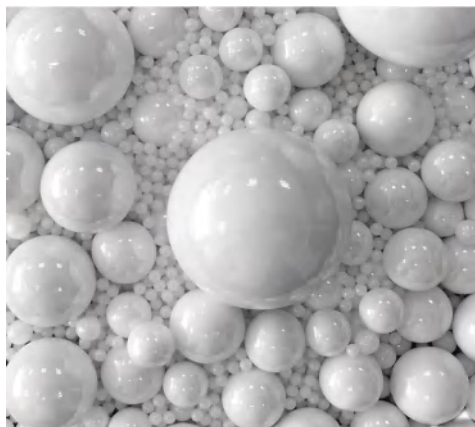

产品特性

Product Features

- 球体圆整体度好, 表面光滑, 有珍珠般光泽;
- 有非常的韧性, 耐冲击, 在高速运转中不碎裂。
TZP锆珠的耐磨性是玻璃珠的30-50倍;
- TZP锆珠密度比其它研磨珠高, 有极高的研磨
- 效率, 可以提高物料固含量或加大物料流量。

货 号	规 格	单 位
SK-R045	0.5mm/100g	100g/瓶
SK-R044	0.3mm/100g	100g/瓶
SK-R043	0.1-0.2mm/100g	100g/瓶
SK-R042	5mm/100g	100g/瓶
SK-R038	1mm/100g	100g/瓶
SK-R041	4mm/100g	100g/瓶
SK-R040	3mm/100g	100g/瓶
SK-R039	2mm/100g	100g/瓶

CARBON FIBER BRUSH

干冰



干冰, 白色晶体, 常温下易升华, 汽化热高, 在常压下升华时可使周围温度迅速下降, 因此干冰在空气中升华时会液化甚至进一步凝结空气中的水蒸气, 形成的水蒸气液滴或小冰晶附着在空气中的灰尘上形成我们可见的白色烟雾。干冰晶体结构为简单立方, 属于分子晶体。单个的二氧化碳分子以不同的取向位于立方体的顶点和面心上, 堆积形成干冰晶体。



产品特性

Product Features

- 低温性能:干冰的温度极低, 为-78.5℃ (-109.3°F), 这使得它成为理想的制冷材料。
- 升华过程:在常温下, 干冰不会融化成液体, 而是直接从固态转变为气态, 这一过程称为升华。
- 密度小:干冰相对较轻, 密度约为1.56 g/cm³, 这使得它容易携带和使用。
- 无味、无色:干冰没有气味和颜色, 对食品等物质不会产生异味或染色。

货 号	规 格	单 位
sk-1171	10kg	箱
sk-1170	5kg	箱
sk-f0457-1	6kg	箱

MOUSE DISSECTION HEATING PADS

老鼠解剖加热垫

这是一款直接作用于宠物身体的保温垫。防火阻燃硅胶材料,防止任何火烧,漏电风险。智能恒温,温控范围:0-50°



产品特性

Product Features

- 防水材质,特殊PVC外皮加热垫,防水材质,节能安全.应用灵活;
- 升级加粗电源线,加粗加固电源线:不懼怕爬虫,猫狗的拉扯,撕咬。

货号	规格	单位
SK-3223	20*35CM/20W	块
SK-3224	30*50cm/30W	块
SK-3225	40*60cm/40W	块
sk-1914	15*25cm	块

MOUSE OPERATING TABLE LED LIGHT

老鼠手术台LED灯

手术灯 LED探照灯, 护眼无辐射1W, 进口大功率, 双金线芯片灯珠, 夹子安装, 可以夹取。



货 号	规 格	单 位
sk-1913	1W	个

ULTRAVIOLET DISINFECTION LAMP


紫外消毒灯

紫外线杀菌灯是一种采用石英玻璃或其他透紫玻璃的低气压汞蒸气放电灯,放电产生以波长253.7nm为主的紫外辐射,其紫外辐射能杀灭细菌和病毒。

产品特性

Product Features

- 360°全方位消毒,短波UVC照射细菌体后,会让糖核心酸(DNA)之间的链接断裂后立即死亡,能够有效预防细菌传播,提升除菌效率是理想安全的杀菌波段;
- 三档定时,10m隔墙遥控,开启延时,可防止紫外线照人;
- 安装简单,使用方便无门槛,零件少,即插即用。

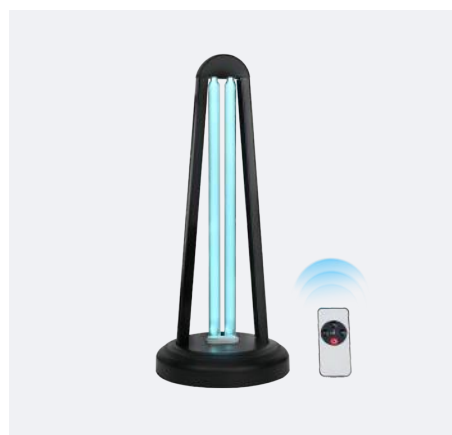

货 号	规 格	单 位
sk-f6005	功率: 31-40W,带遥控	个

PORTABLE UV LAMP

手提式紫外灯



手提式紫外灯具有体积小、重量轻、紫外强度高、使用方便等优点,由于采用了目前国际上已广泛使用的365nm、254nm 波长紫外线,因而灵敏度高,对样品的破坏性作用小。

- ABS塑料外壳,整机机构简单、轻便零件通用性强、使用维修便捷;
- 一开即用,连上电源后,打开“开/关”点亮灯管即可将被检测的样品放在灯下,观察分析;
- 双波长光源,两组光源的波长分别为254mm和365mm.两种光源即可单独使用亦可组合使用。

货号	规格	单位
sk-f0482	双波长, 254nm, 365nm	个

UV ANALYZER LAMP

紫外分析仪灯管



紫外线即Ultraviolet, 简称UV, 紫外线灯管简称UV灯管, 其中按波段的不同, 分别为UV-A, UV-B, UV-C各具有不同的用途。

- 选材考究, 采用优质石英玻璃管, 羟基含量 $\leq 50\text{ppm}$ 、紫外线透过率 $\geq 90\%$;
- 纯铜通电接口, 灯头接头与家常安装, 常用的接口相吻合把灯管插入支架后旋转 90° 即可装上, 安装方便;
- 电子粉技术, 灯管钨灯丝部分, 增加惰性粉, 有效延长灯管使用寿命。



货 号	规 格	单 位
sk-884	365nm/24cm长	根
sk-882	365nm/21cm长	根
sk-881	254nm/21cm长	根
sk-883	254nm/24cm长	根
SK-3195	365nm/23.5cm长	根
SK-3196	254nm/23.5cm长	根

UV LAMP RACKS

紫外灯管架



- 选材考究,精选优良材质,质量稳定;
- 绝缘材质,灯架头两端支架头不导电;
- 防阻燃材料,选用防阻燃材料耐高温,不易氧化;
- 搭配使用,搭配紫外线灯管,适用于客厅、卫生间、厨房、幼儿园、医院、诊所、宠物店等空间,安装简易,有效杀菌除螨消毒。



货 号	规 格	单 位
SK-R067	10w/35cm	根
SK-R066	15w/46cm	根

EXPLOSION-PROOF INFRARED BULBS

防爆红外线灯泡


红外线灯,又名红外线加热灯,是指辐射的主要成分在红外光谱范围内的灯。红外线灯可以提供能精确控制的能量辐射,可以用来加热。红外线灯广泛应用于机械、汽车、食品、医疗等行业。



- 275W大功率,即开即热,无需等待,适用于各种型号理疗灯;
- 防爆材质,耐高温,特殊高品质材质;
- 温度高,灯泡快速发热,无需等待,平均温度180°C中心温度峰值可以达到203摄氏度;
- 镀铜灯头,不易生锈,经久耐用。



防爆材质

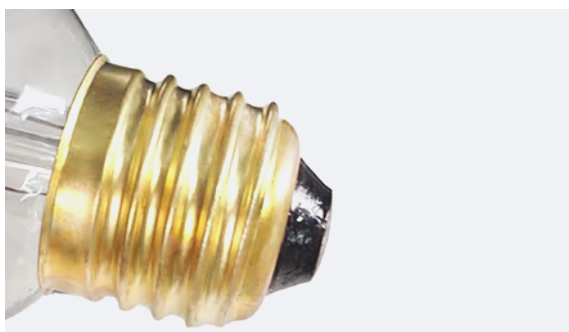


镀铜灯头

货 号	规 格	包 装
SK-R068	275W	个

LABORATORY INFRARED LAMPS

实验室红外线灯

红外线灯 (infrared lamp), 辐射的主要成分在红外光谱范围内的灯。红外线灯是将钨丝伸入充气的石英管中构成。钨丝在交流电压作用下发热并加热石英管中的气体, 由此产生红外线电磁波。红外线向外辐射, 可以用来加热。

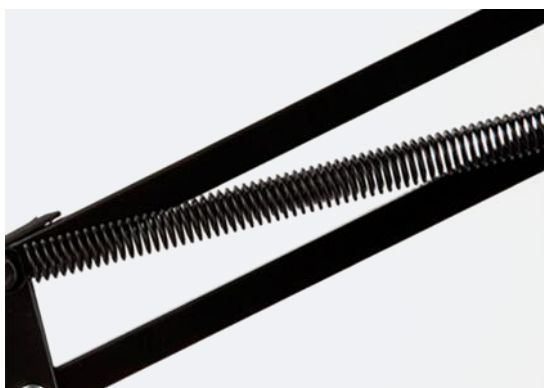

- 金属灯罩, 灯罩采用精工金属制作, 表面烤漆处理, 简约时尚;
- 可分离灯罩, 灯罩与灯头可分离设计, 方便清洁, 操作简单;
- 选材考究, 采用250w的红外线灯泡, 优选加粗灯丝, 加厚玻璃;
- 粗厚型弹簧, 高密度粗厚型弹簧设计, 厚实耐用, 分量有增无减。

货号	规格	包装
sk-2324	250W (灯泡 (红色) + 灯架)	套

INFRARED BAKING LAMP

红外烘烤灯

红外烘烤灯用于快速烘烤样品，使样品脱去水份。亮度可在约50%-100%范围内调节。也可通过改变灯的高度影响样品的表面温度。



操作方法

Operating Instructions

- 在使用过程中，应注意放置红外灯工作台的平稳，防止晃动震动。
- 从温度较低的环境下转移至常温室后需自然放置2-4小时后方可开机，以免损坏仪器。

红外烘烤灯


货 号	规 格	包 装
SK-4849	275W	台

红外烘烤灯(数显型)

货 号	规 格	包 装
SK-4848	275W	台

MERCURY LAMP

汞灯泡

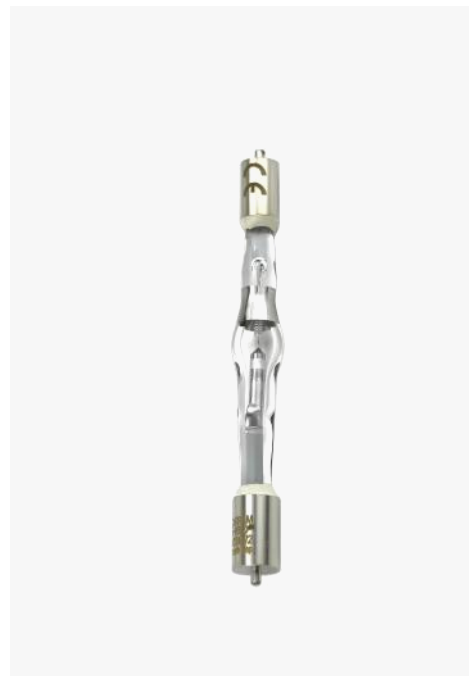

产品特性

Product Features

- 多线光谱；
- 在UV和可见光光谱有较高的辐射能量；
- DC环境下工作,前提是符合灯泡工作环境要求；
- 寿命长,性价比高,安装正确及保养使用的好理论寿命可达300小时左右。

货 号	规 格	单 位
SK-7494	103W	个

ALCOHOL WICK

酒精灯芯



棉芯灯芯是最常见的酒精灯灯芯,主要由天然棉制成。这种灯芯有高吸油性,可以很好地吸取酒精,燃烧稳定且不易熄灭。但是,如果密封不严密,棉芯会吸收空气中的水分,从而导致燃烧不稳定。

产品特性

Product Features

- 选材考究, 高含棉量灯芯, 有助于酒精的逆向吸附, 有效防止灯芯干烧, 延长使用寿命;
- 自封袋密封包装不易受潮, 可长期保存;
- 灯芯的表面由多股棉线编制而成, 有助于酒精的逆向吸附;
- 与酒精灯搭配使用。



货 号	规 格	包 装
sk-f0776	直径6mm长15cm/20根	包

GAS CHROMATOGRAPHY COLUMNS

气相色谱柱



填充柱是指填充了固定相的色谱柱。将色谱分析的固定相（吸附剂、涂渍了固定液的载体、离子交换树脂、凝胶颗粒等）作为填料，填充于一定口径、长度和形状的柱管中。填充柱的优点是制备和使用方法都比较容易掌握，具有多种填料可供选择，能满足一般样品分析要求。



货 号	规 格	单 位
SK-008	2m*3mm	根

REFILL THE CARTRIDGE

填充墨盒




填充墨盒使用完墨水后,可填充墨水后再次利用,使墨盒的寿命不只一次。节省费用及保护环境。

产品特性

Product Features

- 墨水颜色纯正,采用优质墨水,颗粒小于20纳米,打印色彩真实流畅;
- 墨水品质好,颗粒细小、均匀,拒绝堵头;
- 出墨口,光滑无毛刺,打印流畅不漏墨;
- 升级芯片,半永久芯片,强力兼容智能识别,打印稳定持久耐用无需解码,循环加墨使用。

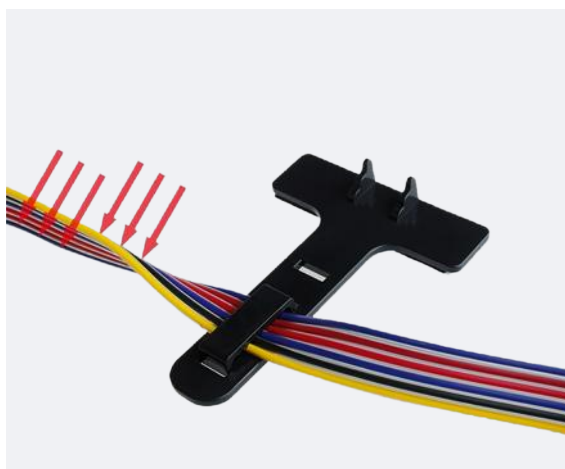

货号	规格	单位
sk-402	六色套装(空墨盒)适用于爱普生R330	套
SK-401	六色套装(空墨盒)	套

ABSORPTION BOTTLE SAMPLING BOX

吸收瓶采样箱



产品可适配多孔玻板吸收瓶、冲击式吸收瓶、烟道吸收瓶、气泡吸收瓶等所有采样瓶和规格.

产品特性

Product Features

- 品质保障, 高密度波浪棉, 内置海绵垫, 有效的保护工具, 更安全;
- 做工精致, 四周包角, 坚硬牢固, 经久耐用;
- 耐摔防撞, 配置克马锁, 铝合金骨架设计, 更牢固更耐用;


货 号	规 格	单 位
sk-f3695	40孔采样箱	个

EXPERIMENT NOTEBOOK

实验记录本

产品特性 Product Features

- 加厚纸张,双面书写,不洇墨;
- 质地柔软,柔软可360°弯曲,可平摊180°;
- 缝线装订,智能车缝,自动烫边线头;
- 使用便捷,研究数据,思路笔记,有迹可循。

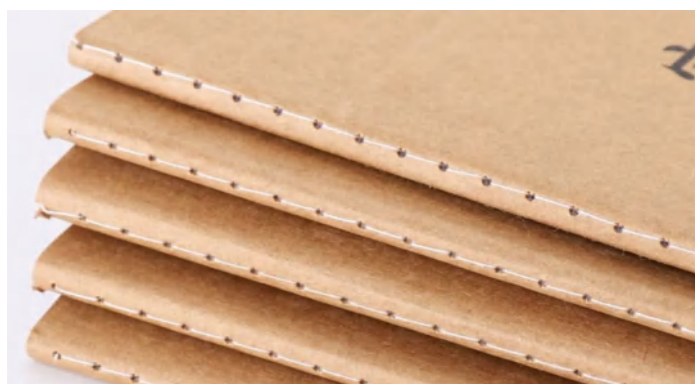

货号	规格	单位
SK-3673	A4/80页	个
SK-3674	A4/80页	10本/盒

LIGHT METER

光照度计



照度计(或称 勒克斯计)是一种专门测量照度的仪器仪表

照度计(或称 勒克斯计)是一种专门测量照度的仪器仪表。就是测量物体被照明的程度,也即物体表面所得到的 光通量 与被照面积之比。照度计通常是由 硒光电池 或 硅光电池 配合 滤光片 和 微安表 组成。光电池 是把光能直接转换成电能的光电元件。当光线射到 硒光电池 表面时,入射光 透过金属薄膜4到达半导体硒层2和金属薄膜4的分界面上,在界面上产生 光电效应。

货 号	规 格	单 位
TSE-1330A	TSE-1330A	个

184 DILUENT

184稀释剂

- 适用PDMS的粘稠度降低以及邵氏硬度的降低;
- 无色透明;
- 耐高温240°C;
- 化学稳定性;
- 可作消泡用。



加入不超过10%稀释剂会降低PDMS粘度
加入少于5%时对PDMS额电性能无影响
加入过多时会降低PDMS物理强度和硬度



货 号	规 格	单 位
SK-4915	100ml	瓶
SK-4916	500ml	瓶

PH STANDARD BUFFER SOLUTION

PH标准缓冲液



PH标准缓冲液

实验室标准液涉及校准、维护、存储和清洁过程,可以提供准确的pH值、电导率、离子浓度、ORP/氧化还原和溶解氧读数。既有瓶装溶液,也有袋装溶液。

pH缓冲液是一种pH值已知,并且用于电极校准的参比溶液。pH缓冲液对于确保准确的pH读数至关重要。我们拥有一系列准确的pH校准液可供选择,从技术缓冲液、由经过认证机构(DAKKS)认证的缓冲液,到确保高精度的NIST/DIN缓冲液不等。为了最大限度降低污染风险,选择小瓶装或一次性袋装。

货号	规格	单位
SK-4982	PH4.01/250ML	瓶
SK-4983	PH6.68/250ML	瓶
SK-4984	PH9.18/250ML	瓶
SK-4985	PH7.0/250ML	瓶
SK-4986	PH9.21/250ML	瓶
SK-4987	PH10.0/250ML	瓶
SK-4988	PH2.0/250ML	瓶
SK-4989	PH11.0/250ML	瓶
SK-4990	PH4.0/250ML	瓶
SK-4991	PH1.68/250ML	瓶

电导率标准液

货号	规格	单位
SK-4992	12.88ms/cm/250ml	瓶
SK-4993	1413us/cm/250ml	瓶

PTFE EMULSION/POWDER

PTFE乳液/粉末

聚四氟乙烯乳液是平均粒径为0.2μm-0.3 μm, PTFE树脂悬浮在液态水中形成的胶体, 浓度为60%左右, pH值9-10。经聚四氟乙烯乳液处理后的制品, 具有卓越的化学腐蚀能力, 如耐强酸、强碱、强氧化剂等, 有突出的耐热、耐寒及耐摩性, 长期使用温度范围为-200°C+250°C。还有优异的电绝缘性, 且不受温度与频率的影响。主要用途: 可直接用于浸渍多孔材料如石棉制品、玻璃纤维、陶瓷和电碳制品等。



本品是将四氟乙烯聚合后的分散液浓缩至聚四氟乙烯固体含量为60%左右(重量)并以非离子型表面活性剂稳定的水分散液。有突出的耐热、耐寒及耐摩性, 还有优异的电绝缘性, 且不受温度与频率的影响, 此外, 尚有不粘着、不吸水、不燃烧等特点。并针对电池、电容产品进行性能优化, 和浆不团聚, 流动性好, 质量稳定, 极片成型效果更好, 更有利于生产控制。同时也适用于高品质氢镍电池负极制造和烧结电池制造。对提高电池的电压平台和大电流放电的性能有明显效果。

PTFE乳液 聚四氟乙烯 粘结剂60%


货号	规格	单位
SK-4994	100g	瓶
SK-4995	250g	瓶
SK-4996	1kg	瓶

PTFE粉末 聚四氟乙烯 粘结剂60%

货号	规格	单位
SK-4997	100g	瓶
SK-4998	500g	瓶
SK-4999	1kg	瓶

ELECTIC SHAVER FOR LABORATORY ANIMALS

实验动物电动剃毛器

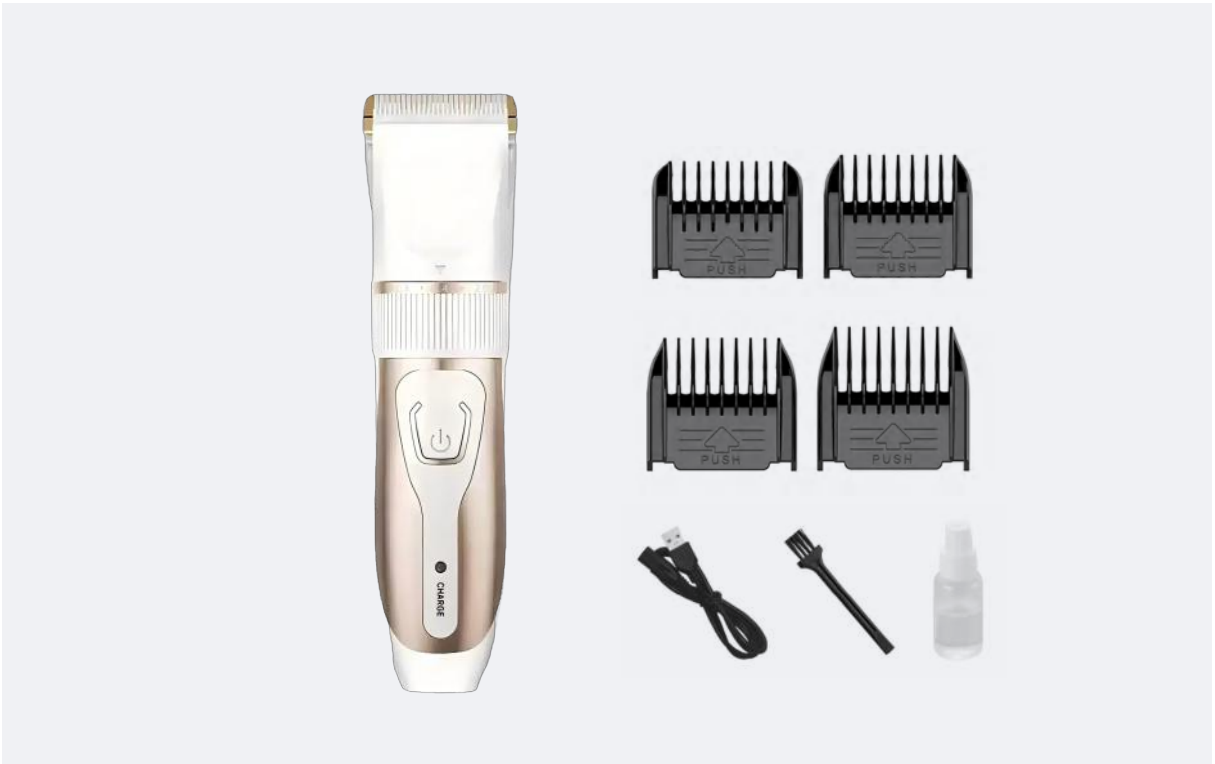

产品特性

Product Features

- 五档微距可调，轻旋侧面旋钮，刀头可调节0.4mm-2.0mm；
- 一机两用 双刀头配置，送剃脚毛刀头，搭配强动力大刀头，全身塑形，局部精修；
- 可弯曲，壁厚均匀耐磨耐用柔软有弹性，但有一定的硬度；
- 全身可水洗。

货 号	规 格	单 位
SK-5137	1套/盒	套

LABWARE CLEANER

实验室器皿清洗剂



实验室器皿清洗剂是专门用于去除实验器材(如玻璃、塑料、金属器皿)上残留的化学试剂、生物样本或有机/无机污染物的清洁产品。其核心特点是高效去污、低残留、兼容材质广。

产品特性

Product Features

- 表面活性剂, 碱性小、泡沫少、去污力强;
- 安全无毒, 可替代重铬酸钾等腐蚀性洗液;
- 密封性强, 铝箔封口, 防潮防湿。

货号	规格	单位
SK-5660	500g	瓶

STEEL PAPER CUTTER

钢质裁纸刀



裁纸刀是一种用于裁切各种纸张、照片、美工卡纸、冷热裱纸的必备工具,采用自动镇纸设计,刀口经特殊处理,裁切锋利且经久耐用,裁切后的产品整齐无毛。

产品特性

Product Features

- 包胶波浪式手柄,贴合手感,握感舒适,杠杆结构,防滑设计,裁切轻松方便;
- 可移动档纸设计,有效对齐纸张,辅助纸张对齐,可左右移动,防止纸张移位;
- 安全卡扣设计,安全更上一层楼,手柄安全卡扣设计,外拉刀柄上拉即可打开刀锁裁切完成,外拉刀柄下拉锁定刀锁,避免意外;

货 号	规 格	单 位
SK-4110	8014 (480*260mm)	个
SK-4111	8015 (250*250mm)	个
SK-4112	8016 (220*190mm)	个
SK-4113	8011 (720*430mm)	个
SK-4114	8013 (400*331mm)	个

WOODEN PAPER CUTTER

木质裁纸刀

裁纸刀是一种用于裁切各种纸张、照片、美工卡纸、冷热裱纸的必备工具,采用自动镇纸设计,刀口经特殊处理,裁切锋利且经久耐用,裁切后的产品整齐无毛。

产品特性

Product Features

- 优质选材,板材平面密度板填充,松木包裹,整体结构稳定,坚固结实经过喷漆处理不易变色、发霉、腐朽及生虫等;
- 包胶波浪式手柄,贴合手感,握感舒适,杠杆结构,防滑设计,裁切轻松方便;
- 可移动档纸设计,有效对齐纸张,辅助纸张对齐,可左右移动,防止纸张移位;
- 安全卡扣设计,安全更上一层楼,手柄安全卡扣设计,外拉刀柄上拉即可打开刀锁裁切完成,外拉刀柄下拉锁定刀锁,避免意外;



货 号	规 格	单 位
SK-4115	8005 (273*248mm)	个
SK-4116	8004 (300*250mm)	个
SK-4117	8001 (530*410mm)	个

DIGITAL MULTIMETER

数显万用表



DL8460



DL8450



DL8480

产品特性 Product Features

- 具有过载保护功能,误操作不烧表,智能防烧,具有过载保护功能,防止误操作烧表电压、电流档全量程过载保护,使用安全放心;
- 高清显示屏,字迹清晰读数方便,高清晰显示屏,字迹清晰,读数方便;
- 背部自带支架,大屏观察数据,方便快捷;
- 大开口钳口,大开口使用方便,强力闭合,为各类电线提供维修,符合电路检测设计;

货号	规格	单位
SK-4120	DL8460	个
SK-4121	DL8480	个
SK-4122	DL8450(带温度)	个

WOODEN PAPER CUTTER

高效切片石蜡




切片石蜡是制备组织切片的重要材料。在生物学、医学和药学领域,科学家使用切片石蜡来制备组织切片,以进行研究和分析。切片石蜡具有优异的切割性能,可以制备出非常薄的组织切片,便于显微镜观察和分析。切片石蜡还可以作为组织固定和染色的辅助材料,有助于提高组织切片的质量和可视化效果。切片石蜡在石油行业有重要的应用。



货号	规格	单位
SK-4360	熔点56-58/500g	盒
SK-4361	熔点58-60/500g	盒
SK-4362	熔点60-62/500g	盒

HOT MELT ADHESIVE STICK

热熔器胶棒

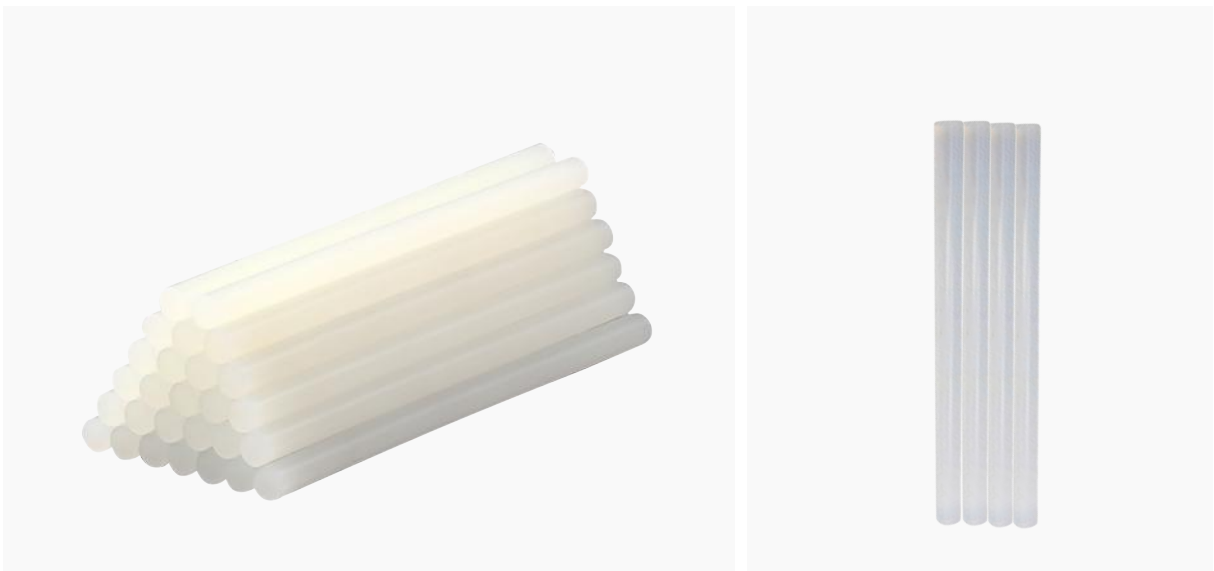

热熔胶棒是以乙烯-醋酸乙烯共聚物 (EVA) 为主要材料, 添加增粘剂制成的固体粘合剂, 属于无毒环保型工业耗材, 广泛用于手工制作、工业生产及日常生活场景

产品特性

Product Features

- 优质选材, 高纯度无杂质, 晶莹剔透少许气泡;
- 高恒温持续出胶, 均匀出胶可以确保胶水在粘接面上分布均匀;
- 放置在阴凉通风处, 可长期保存不易老化。

货 号	规 格	单 位
SK-5812	7*200mm	100根/包
SK-5813	11*200mm	50根/包
SK-5814	11*270mm	50根/包

ANIMAL MARKING PEN

动物标记笔



适用于动物实验,养殖场动物标识等场合采用特殊颜料墨水,底气味,颜色醒目。适合大多数动物皮肤表面。

产品特性 Product Features

- 具有很好的耐高温特性与耐磨性不会引起涂料的墨水浮现出来2mm的笔幅更具符合书写标准;
- 笔杆采用加大容量金属材质,为促进环保采用可加墨设计,用完加墨还能接着用

动物标记笔/动物记号笔

货号	规格	单位
SK-6113	红色/圆头	支
SK-6114	红色/方头	支
SK-6115	蓝色/圆头	支
SK-6116	蓝色/方头	支
SK-6117	黑色/圆头	支
SK-6118	黑色/方头	支

动物标记笔墨水/动物记号笔墨水

货号	规格	单位
SK-6119	10ml/红色	瓶
SK-6120	10ml/蓝色	瓶
SK-6121	10ml/黑色	瓶

IMPORTED ANIMAL MARKING PEN

进口动物标记笔

实验动物专用标记笔可用于标记大小鼠，标记后可用做核磁MRI等实验，本产品使用日本卫生、劳动和福利部批准和管理的用于食品、药品和化妆品的“法定颜料”，这些颜料无害，不含任何有害物质。本动物标记笔通过了日本食品药品安全研究所毒性试验，对动物不会造成任何伤害，符合动物福利。



货 号	规 格	单 位
SK-6122	细10ml/蓝色	支
SK-6123	细10ml/橙色	支
SK-6124	细10ml/红色	支
SK-6125	细10ml/绿色	支
SK-6126	细10ml/黄色	支
SK-6127	细10ml/黑色	支
SK-6128	粗15ml/蓝色	支
SK-6129	粗15ml/橙色	支
SK-6130	粗15ml/红色	支
SK-6131	粗15ml/绿色	支
SK-6132	粗15ml/黄色	支
SK-6133	粗15ml/黑色	支

CLOSED ELECTRIC FURNACE

封闭电炉



实验电炉, 是一种在实验室中常用的加热设备。其主要功能是将电能转化为热能, 从而对实验室中的样品或材料进行加热处理。

产品特性

Product Features

- 采用封闭式设计, 通过不锈钢镍铬丝发热管加热升温, 再通过铸铁导热盘加热, 全程无明火, 使用更放心;
- 采用镍铬不锈钢发热管加热, 铸铁导热盘升温, 受热更均匀, 升温更快速;



货 号	规 格	单 位
SK-7169	1000W	个
SK-7170	1500W	个
SK-7171	2000W	个

DYNE PEN

达因笔



达因笔，也叫电晕笔或达英测试笔，是表面张力测试中的重要工具。无论是工业生产还是实验室研究，它都发挥着不可替代的作用。达因笔主要用于检测物体表面的清洁度和表面张力，是许多行业不可或缺的工具。比如塑料、印刷、包装等行业，都需要用到达因笔来确保产品质量。

通过测量液体在固体表面上的铺展情况来判断表面张力的大小。当达因笔的液体接触到被测物表面时，如果液体能够很好地铺展开来，说明表面张力符合标准；反之，则可能需要进一步处理。这种简单的操作方式，使得达因笔成为了快速检测的理想工具。

货 号	规 格	单 位
SK-7193	22mN/m	支
SK-7194	24mN/m	支
SK-7195	26mN/m	支
SK-7196	28mN/m	支
SK-7197	30mN/m	支
SK-7198	32mN/m	支
SK-7199	34mN/m	支
SK-7200	36mN/m	支
SK-7201	38mN/m	支
SK-7202	40mN/m	支
SK-7203	42mN/m	支
SK-7204	44mN/m	支
SK-7205	46mN/m	支
SK-7206	48mN/m	支
SK-7207	50mN/m	支
SK-7208	52mN/m	支

ALUMINUM MINI ALCOHOL LAMP

铝制迷你酒精灯




产品采用铝材，耐高温，防烫手，坚固防爆，硅胶密封。



货 号	规 格	单 位
SK-7279	银色50ml	个
SK-7280	银色100ml	个
SK-7281	金色50ml	个
SK-7282	金色100ml	个

DISTILLED WATER

蒸馏水

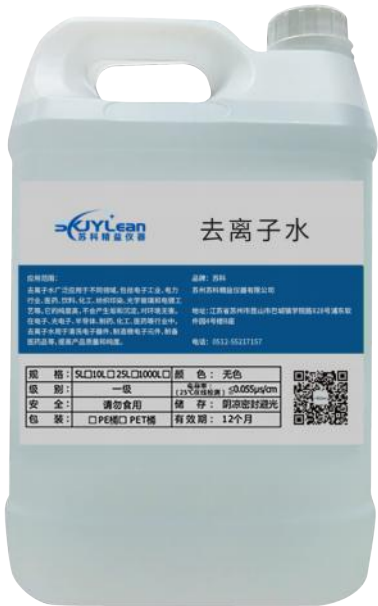

产品储存 密封储存于阴凉干燥处

产品性能

采用先进技术设备，去除水中各种杂质离子，出水水质达到国家标准《GB/T11446.1-1997》中EW-IV符合的要求

适用范围

用于化工、盐雾测试、实验分析、激光切割机冷却、电池补充水，PCB板清洗等

货 号	规 格	单 位
SK-7294	5L	桶
SK-7295	10L	桶
SK-7296	20L	桶
SK-7297	25L	桶



苏州苏科精益仪器有限公司

地址:江苏省苏州市昆山市巴城镇学院路828号浦东软件园4号楼B座

联系人:郭经理17326185736 0512-55217157

邮箱:szskjy@yeah.net

公司官网:www.szskjys.com 商城: www.szskjy.com



公众号